

**改訂 平成30年7月(第3版)

*改訂 平成24年5月(第2版)


富士ドライケムスライド TCHO-PⅢ

【全般的な注意】

- ア. 本製品は、体外診断用でありそれ以外の目的で使用しないで下さい。
 イ. 診断は他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総合的に判断して下さい。
 ウ. 添付文書以外の使用方法については保証を致しません。
 エ. 使用する機器の添付文書及び取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。

【形状・構造等(キットの構成)】

多層一体型フィルムスライド
 本品の層構成は、図のようになっています。

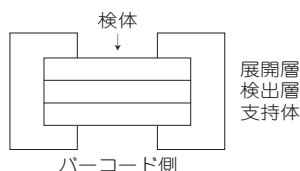

【反応系に参与する成分】

コレステロールオキシダーゼ
 シアリールイミダゾールロイコ色素

【その他の成分】

フェロシアン化カリウム

【使用目的】

血清又は血漿中の総コレステロール濃度の測定

【測定原理】

本品の測定法はコレステロールオキシダーゼを用いる酵素法に基づいています。

富士ドライケムスライド TCHO-PⅢ上に、血清又は血漿を点着します。点着された検体は、展開層で均一に展開しながら、界面活性剤の働きで脂質(コレステロール成分)とタンパク質に解離し、次いでコレステロールエステラーゼ(CHE)の働きで、コレステロールエステル類の加水分解反応が始まります。生成したコレステロール及び内因性コレステロールは、次いでコレステロールオキシダーゼ(COD)の働きにより過酸化水素が発生します。過酸化水素はペルオキシダーゼ(POD)の作用で、シアリールイミダゾールロイコ色素を酸化させて青色色素が生成します。

リポ蛋白質

界面活性剤 → コレステロール + コレステロールエステル + タンパク質

コレステロールエステル + H₂O $\xrightarrow{\text{CHE}}$ コレステロール + 脂肪酸

コレステロール + O₂ $\xrightarrow{\text{COD}}$ H₂O₂ + コレステノン

シアリールイミダゾールロイコ色素 + H₂O₂ $\xrightarrow{\text{POD}}$ 青色色素 + 2H₂O

【操作上の注意】

【検体】

- 採血後は速やかに測定して下さい。
- 血漿で使用する場合、抗凝剤はヘパリン又はEDTA塩が使用できません。
ヘパリンを使用するときは血液1mL当たり50単位以下、EDTA塩は5mg以下にして下さい。フッ化ナトリウム、クエン酸、シュウ酸、モノノード酢酸は、使用しないで下さい。
- フィブリン等の沈澱物のない血清又は血漿を使用して下さい。
- TGが超高値の検体は、負の影響があります。
- 測定範囲上限を超えた場合には、精製水又は生理的食塩水で希釈して下さい。希釈して測定した場合には誤差を生じることがありますので、参考値としてお取り扱い下さい。

**【妨害物質等】

- 各物質について、以下の濃度範囲内では著しい影響は見られませんでしたが。

アスコルビン酸	~10mg/dL	ヘモグロビン	~300mg/dL
ビリルビン	~10mg/dL	総タンパク	4.5~8.5g/dL
尿酸	2~9mg/dL		
- 強心剤である塩酸ドブタミン及び塩酸トパミンは負の影響を与える場合があります。

*【その他】

本品は、富士ドライケム生化学分析装置専用試薬です。

【用法・用量(操作方法)】

【スライドの準備】

使用時に必要枚数だけ冷蔵庫より取り出し、室温に戻してから個別包装を開封して下さい。開封したスライドは、速やかに使用して下さい。

*【測定に必要な器具・器材・試薬等】

試薬 : 富士ドライケムスライドTCHO-PⅢ
 使用できる測定機 : 富士ドライケム生化学分析装置(測定波長505nm)
 その他の器材 : 富士ドライケムQCカード(付属品)
 富士ドライケムクリーンチップ又は富士ドライケムオートチップ

*【測定操作法】

付属品の富士ドライケムQCカードを専用測定機のカードリーダー部に読み込ませ、次いでQCカードに対応したスライドを専用測定機にセットします。自動点着又はマイクロピペットで血清又は血漿10μLを点着します。スライドは専用測定機内において、37℃で一定時間加温され、生成した色素は505nmの波長で反射測光されます。反射濃度は、測定機に内蔵された検量線により、総コレステロール濃度に換算されます。

【測定結果の判定法】

基準範囲は検査対象の母集団によって異なりますので、各検査室で基準範囲を設定することをおすすめします。

参考正常値(基準範囲) 150~219mg/dL (3.88~5.66mmol/L) ^[1]

【性能】

- 【感 度】 総コレステロール濃度185mg/dLの標準液を試料とするときの測定値は、157~213mg/dLの範囲です。
 【正 確 性】 既知濃度の管理血清を測定する場合、既知濃度の±15%以内です。
 【同時再現性】 同一検体を5回同時に測定するとき、同時再現性はCV値5%以下です。
 【測定範囲】 50~450mg/dL (1.29~11.64mmol/L)
 【相 関 性】 自動分析機(CHE-COD法)による測定値xと、富士ドライケムによる測定値yとの相関を求めたとき、下記の結果が得られました(自社施設による)。
 血清検体:

回帰式 $y = 0.992x + 1.8$

相関係数 $r = 0.997$

測定数 $n = 78$

【較正用の基準物質(標準物質)】

コレステロール…NIST (SRM1951)

ただし、本標準物質は弊社基準法に対して適用したものであり、富士ドライケムスライドには直接適用できません。

【使用上又は取扱い上の注意】

【取扱い上の注意】

検体はHIV、HBV、HCV等の感染の恐れのあるものとして取り扱って下さい。検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用して下さい。

*【使用上の注意】

- 使用期限を過ぎたスライドは使用しないで下さい。
- 本製品は光に対し非常に敏感であるため、開封したスライドは直ちにカートリッジにセットし、測定機付属のスライドウェイトを置いて速やかにご使用下さい。
- スライド表面及び裏面の中央部には、直接手を触れないで下さい。
- 測定ごとに、一枚のスライドを使用します。血液等を一度点着したスライドは、再使用できません。
- QCカードに磁石を近づけないで下さい。
- アルミ包装に破損がある場合は使用しないで下さい。

【廃棄上の注意】

本製品を未使用あるいは使用済み後、廃棄する場合は基本的に焼却処理をして下さい。使用済み後の廃棄は、感染性産業廃棄物に該当します。委託して処理する場合は、特別管理産業廃棄物処分業の免許を持った業者に、特別管理産業廃棄物管理票(マニフェスト)を添えて処理依頼をして下さい。

【貯蔵方法・有効期間】

【1】貯蔵方法: 遮光した気密容器(未開封の個別包装)で、冷蔵庫(2~8℃)に保存して下さい。

【2】有効期間: 製造後1年6カ月
 使用期限は外箱に記載してあります。

【包装単位】

50枚入(個別包装)

【主要文献】

【1】日本医師会、「高脂血症・診療の手引き」

**【問い合わせ先】

富士フィルム メディカル株式会社 営業本部POCT部
 TEL. 03-6419-8035 FAX. 03-5469-4190
 〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目26番30号

【製造販売元】

製造販売元
 富士フィルム株式会社
 〒258-8538 神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地

**TEL. 0465-83-7121

発売元

富士フィルム メディカル株式会社
 〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目26番30号



TCHO-PⅢ